



St. Anna Ziekenhuis

Bloedprikken op HbA1c en verzenden

WWW.ST-ANNA.NL



| bijzonder betrokken |


Procedure voor het opsturen van bloed ter bepaling van het HbA1c naar het laboratorium van het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop

- Het prikken en opsturen moet ongeveer 14 dagen voor het bezoek aan de diabetes polikliniek gebeuren op een maandag, dinsdag of woensdag.
- U kunt de bloedprik het best vóór de maaltijd uitvoeren, u hoeft echter niet nuchter te zijn.

U dient het bloed op dezelfde dag van het bloedprikken, voor de laatste lichte van de brievenbus, te posten in het daarvoor bestemde verzendetui.

A) Gebruiksaanwijzing voor het prikken

1. Haal de roze stop van het buisje.
2. Zoek een goede prikplaats aan de zijkant van de vinger en maak deze goed schoon met water, droog de vinger af.
3. Prik de vinger aan met de steriele prikker.
4. Veeg de eerste druppel bloed weg.
5. Richt het buisje schuin omhoog naar de druppel en raak de druppel aan met de onderkant van het tuitje.

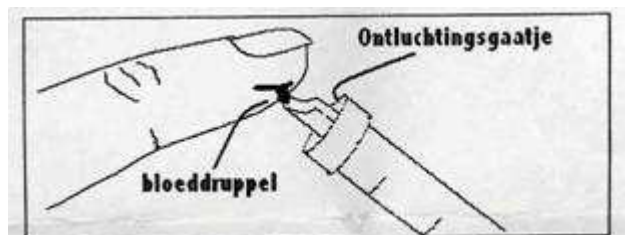

-
6. Het bloed loopt nu in het buisje. Vul het buisje tot aan het streepje van 250.
 7. Sluit het buisje met de roze stop en schud het buisje.
 8. Schrijf uw naam en geboortedatum op het etiket en plak dit op het buisje.

B) Gebruiksaanwijzing voor het verzenden

1. Wikkel het vochtabsorberende materiaal rond het buisje.
2. Plaats dit geheel in de transportblistser. Transportblistser goed sluiten
3. Transportblistser met inhoud plaatsen in de vloeistofdichte Safety bag.
4. Verwijder de witte afdekstrip van de blauwe band van de Safety bag. Druk de voor- en achterzijde goed aan.



1



2



4

5. Stop het aanvraagformulier met uw persoonlijke gegevens en de Safety bag met inhoud in de plastic verzendetui. Sluit het verzendetui. Het verzendetui is nu klaar om te verzenden.
6. Post het verzendetui op de dag van het bloedprikken vóór de laatste lichter van de brievenbus.

Voor de inhoud van de set ZIE OMMEZIJDE.

Bijsluiter verzendetui

Deze set bevat:

- Een plastic verzendetui met antwoordnummer *.
- Een aanvraagformulier voor uw persoonlijke gegevens en de HbA1c aanvraag.
- Een buisje met een roze dop waarin het bloed moet worden opgevangen.
- Een steriele prikker voor de vingerprik.
- Een etiket om op het buisje te plakken.
- Een transportblistel, absorptiemateriaal (wit papier) en een Safety bag *.

St. Anna Ziekenhuis
Klinisch laboratorium
Antwoordnummer 10031
5660 VB Geldrop
Tel: 040-2864866
Fax: 040-2854945

* Vanaf 1 januari 2003 zijn de voorschriften voor het verpakken en verzenden van diagnostische monsters gewijzigd. Van toepassing zijn nu de voorschriften volgens UN3373 en de verpakkingeninstructie P650 (ADR). TPG-Post heeft naast deze voorschriften aanvullende eisen gesteld voor de acceptatie van diagnostische monsters als briefpost. Om aan deze eisen te voldoen, is een combinatieverpakking noodzakelijk, bestaande uit een primaire en secundaire vloeistofdichte verpakking, voldoende absorberend materiaal voor de inhoud, schokabsorberend materiaal en een buitenverpakking van voldoende sterkte.

Voor gebruiksaanwijzing van de set ZIE PAGINA 3

Notities

Heeft u na het lezen van deze folder vragen? Wij raden u aan ze hier op te schrijven. Zo weet u zeker dat u ze niet vergeet.



St. Anna Ziekenhuis

locatie Geldrop

Bogardeind 2
5664 EH Geldrop

locatie Eindhoven

Antoon Coolenlaan 1-03
5644 RX Eindhoven

T 040-286 40 40

COLOFON

Opmerkingen, suggesties of aanvullingen op de folder kunt u kenbaar maken bij patiëntenvoorlichting:
patiëntenvoorlichting@st-anna.nl

WWW.ST-ANNA.NL



**LAB027
06-16**